

2021 年 6 月 1 日


alvaDesc の Windows PC へのインストール方法

(株) アフィニティサイエンス テクニカルサポート


概要 : alvaDesc を Windows PC にインストールする手順をスクリーンショットと共に説明する。

1. 事前準備


- i. alvaDesc 2.0 が対応する Windows OS は 64-bit Windows (7、8.1、10)です。
- ii. alvaDesc 2.0 のインストーラをアフィニティサイエンスのダウンロードサイトからダウンロードします。Windows OS 版の最新バージョンを選択して下さい。
- iii. ダウンロードした zip ファイルを適当な場所にコピーしてから解凍します。

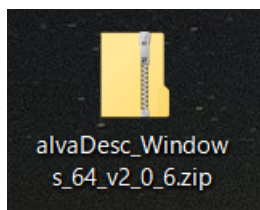


インストーラは zip ファイルになっています。

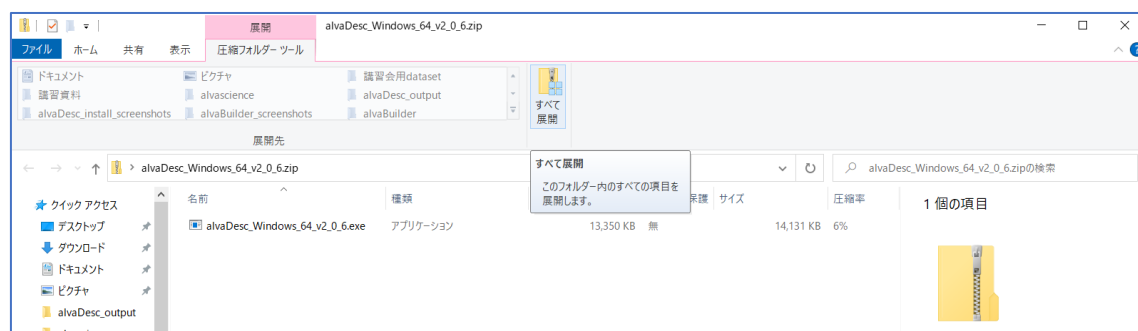

Zip ファイルをダブルクリックして圧縮フォルダツールが表示されたら[すべて展開]を押下します。

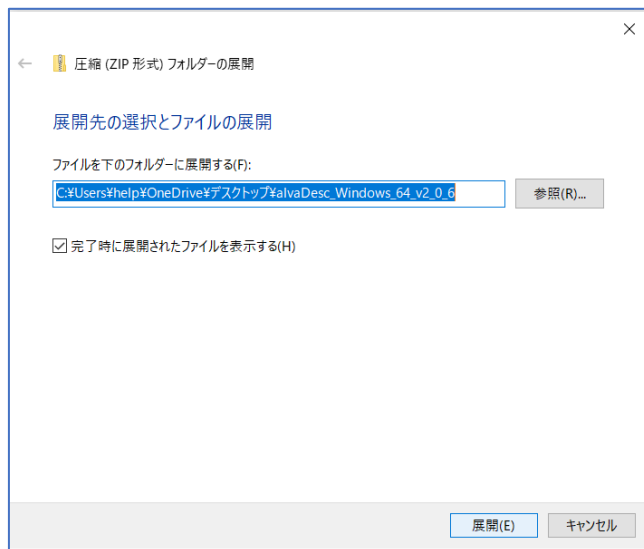


展開先の選択画面が表示されますので、その場所で宜しければ[展開]を押下します。

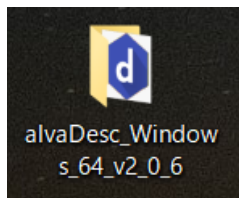


インストーラが入ったフォルダーが解凍されました。


2. インストールの準備

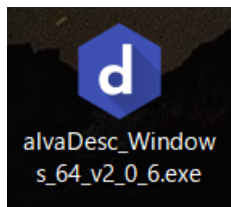


解凍されたフォルダーの中にあるインストーラ exe をダブルクリックしてインストールを開始します。

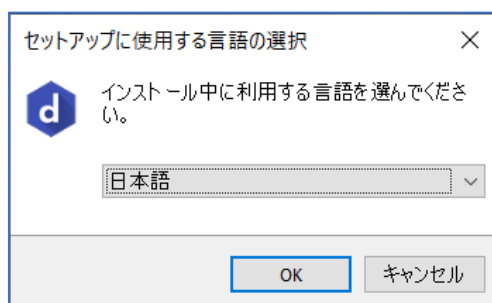


「セットアップに使用する言語の選択」画面が表示されますので、(適切な言語を選択して) [OK]を押下します。

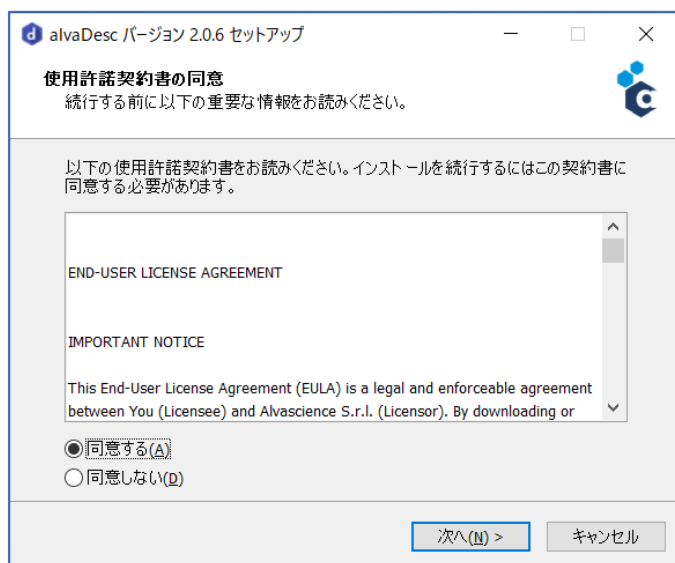


「使用許諾契約の同意」画面が表示されますので、宜しければ[同意する]をクリックした上で[次へ]を押下します。

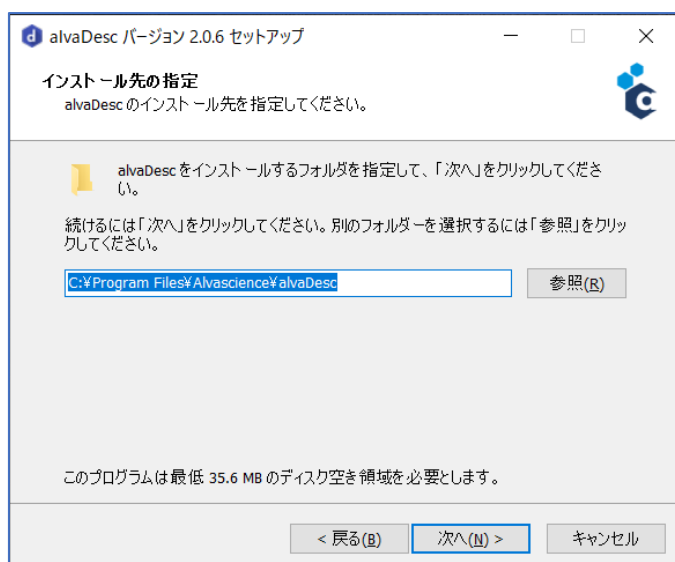


「インストール先の指定」画面が表示されますので、デフォルトで示されているフォルダーで宜しければ[次へ]を押下します。

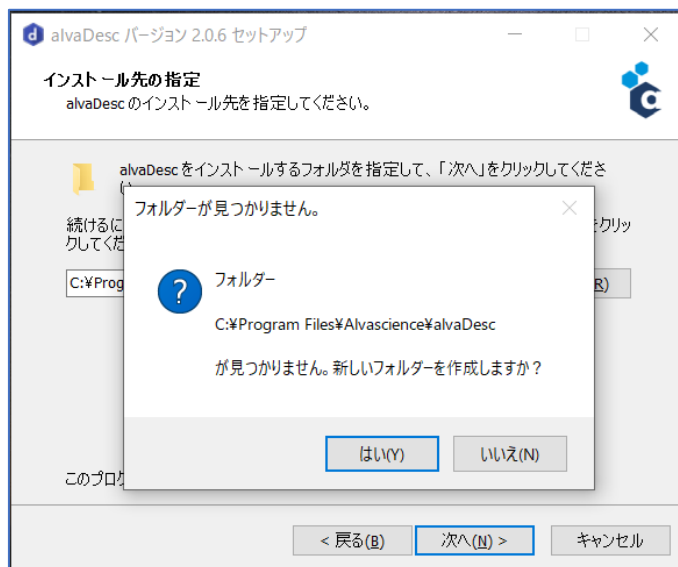


alvaDesc ソフトウェアをその PC に初めてインストールする場合、「新しいフォルダーを作成しますか？」と聞いてきますので[はい]を押下します。

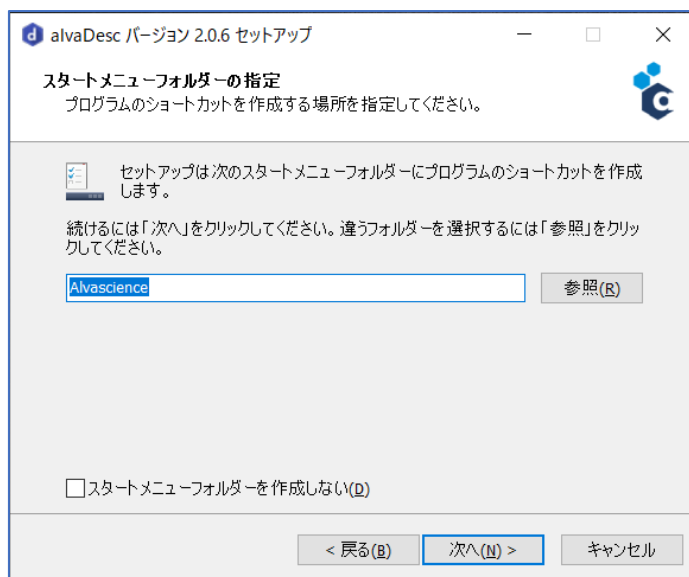

「スタートメニューフォルダーの指定」画面が表示されますので、宜しければ[次へ]を押下します。

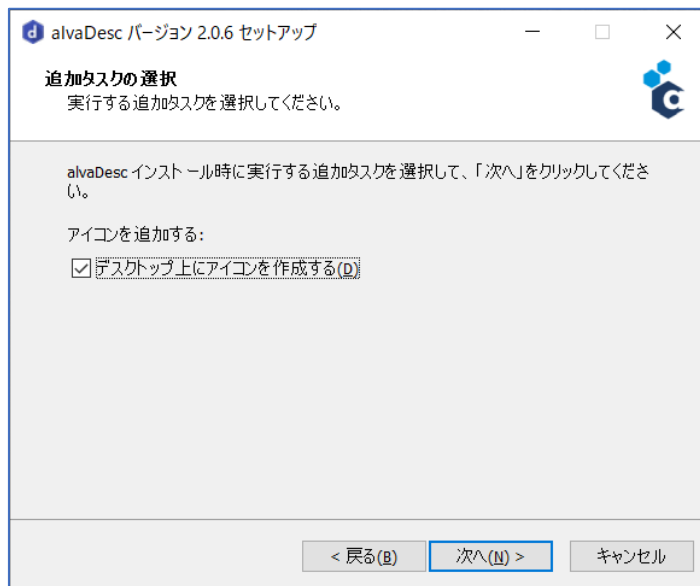


「追加タスクの選択」画面が表示されますので、デスクトップに alvaDesc のアイコンを作成させる場合はチェックボックスをクリックし、チェックがついた状態で[次へ]を押下します。

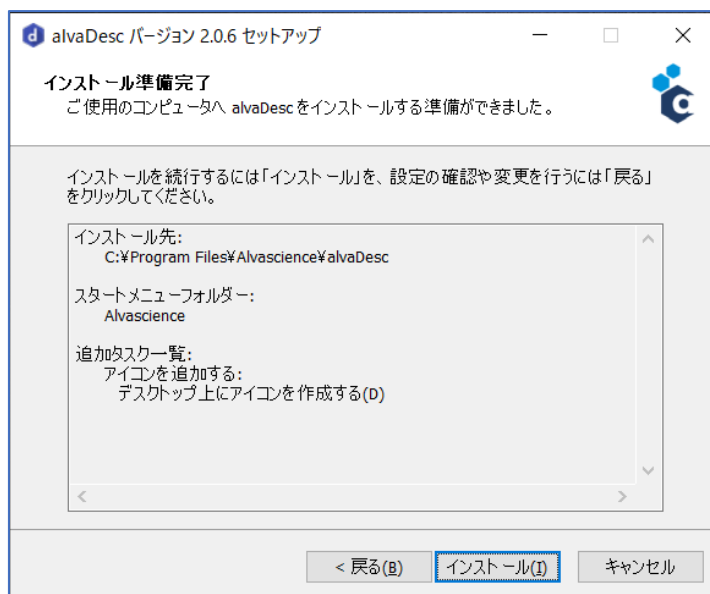


「インストール準備完了」画面が表示されますので、この内容で宜しければ[インストール]を押下します。

3. インストール

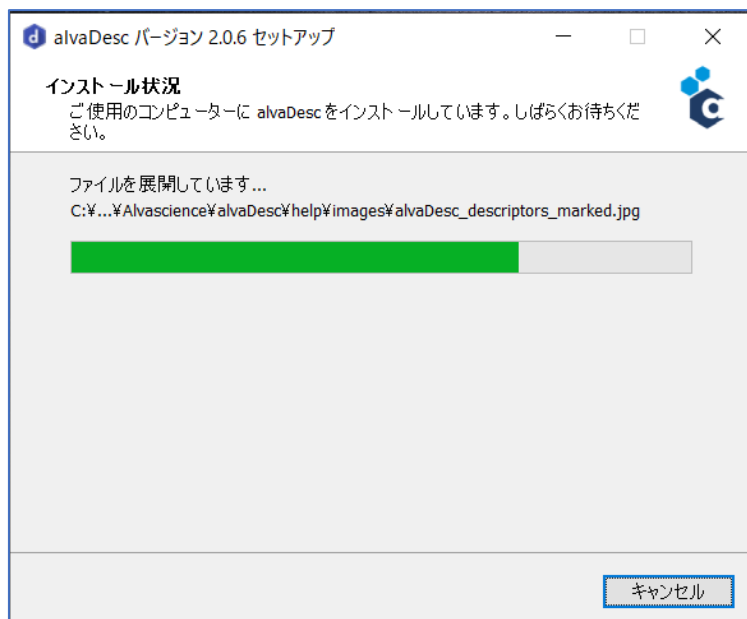


「インストール状況」の画面が表示されます。

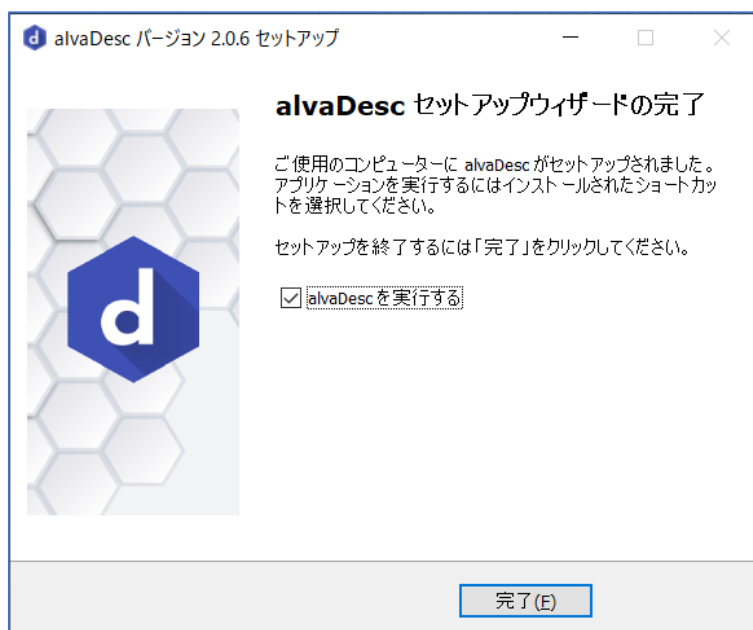


「alvaDesc セットアップウィザードの完了」画面が表示されたらインストールは完了です。引き続き alvaDesc を使用できるようにするステップがありますので、「alvaDesc を実行する」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認の上、[完了]を押下します。


4. ライセンスファイルのインポート

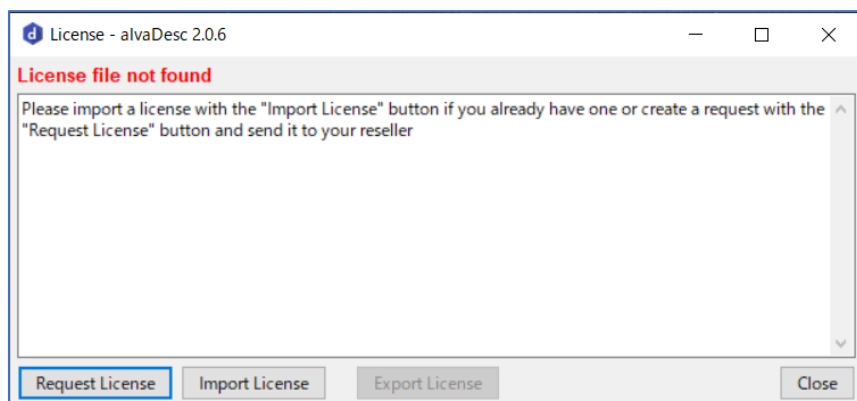


「**License file not found**」画面が表示されますので、既にアフィニティサイエンスから有効なライセンスファイルをご入手済みの場合、[Import License]を押下します。ライセンスファイルを取得されていない場合、アフィニティサイエンスまでお問い合わせ下さい。sales@affinity-science.com
その場合、[Request License]は押下しないようお願いします。

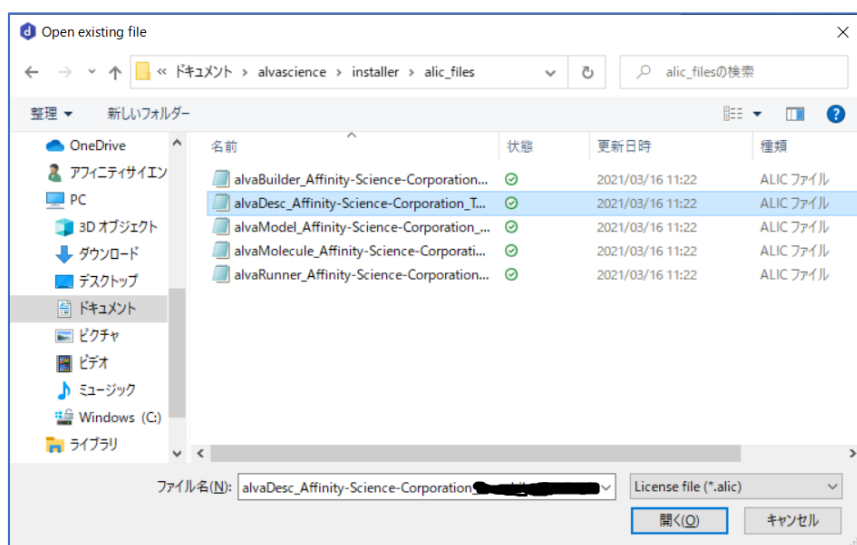

ファイル選択のエクスプローラ画面が開きますので、保存しておいたライセンスファイルを指定して[開く]を押下します。

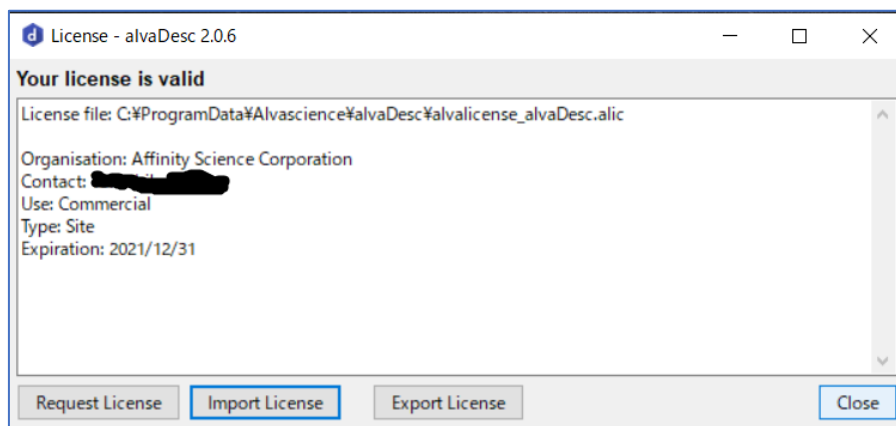


「Your license is valid」の画面が表示されたら[Close]を押下します。この画面でインポートしたライセンスの条件を見ることができます。この画面は、alvaDesc の[Help]メニューから[Product license]を選択することでいつでも見ることができます。

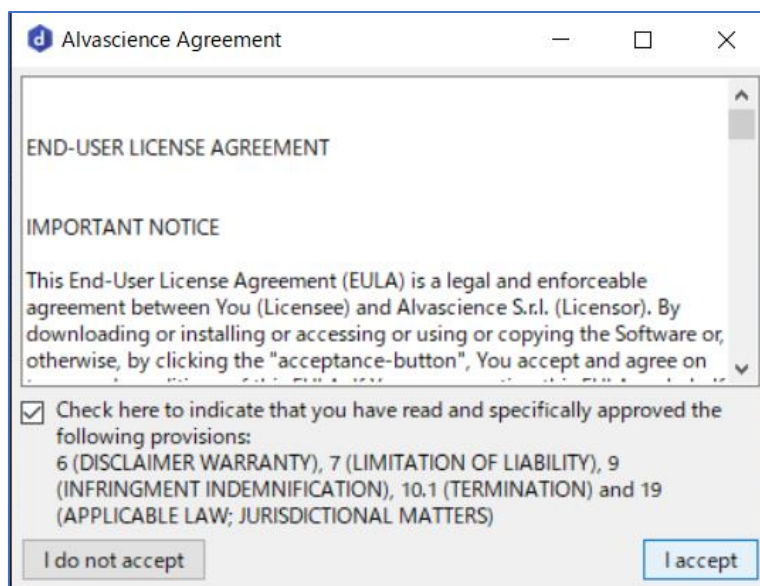

「Alvascience Agreement」画面が表示されますので、このエンドユーザーアグリーメントの内容に同意される場合、中ほどのチェックボックスをクリックしチェックを入れた上で[I accept]を押下します。恐れ入りますが、[I do not accept]の場合は alvaDesc ソフトウェアをお使いになることはできません。

5. alvaDesc の開始

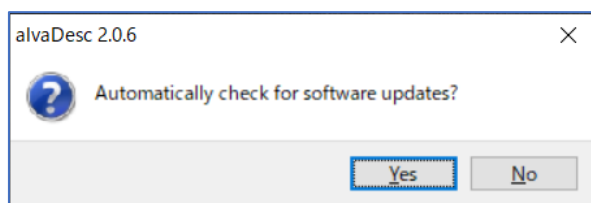


alvaDesc にはソフトウェアのアップデート版があるかどうかを自動でチェックする機能があります。この機能を使用する場合[Yes]を押下します。

この機能は alvaDesc の[Help]メニューから[About alvaDesc]を選択して表示される About 画面でもオンオフすることができます。



alvaDesc のオープニング画面が立ち上がります。

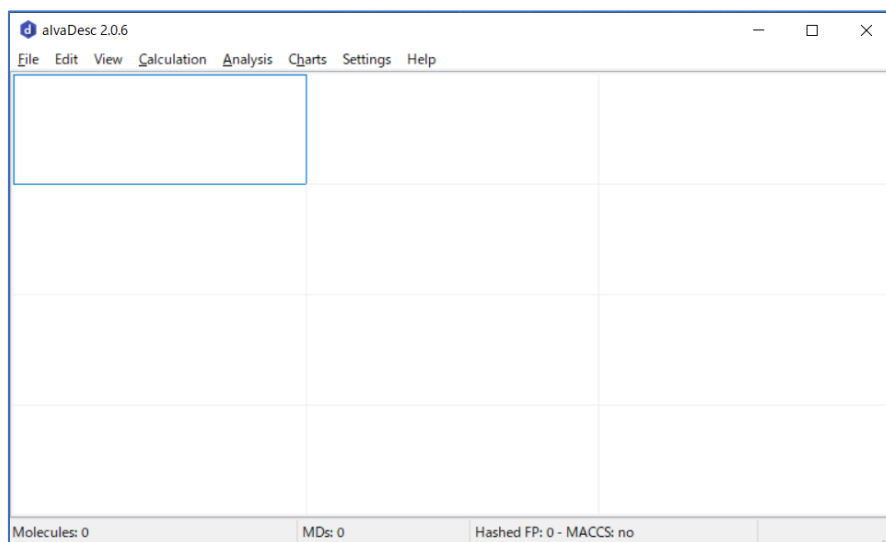

alvaDesc のメインウィンドウが立ち上がりました。これで alvaDesc をご使用いただけるようになりました。