

Spartan for Linux

同一計算機におけるライセンス更新（移行）方法について

はじめに

本文書は、分子モデリングソフト Spartan Linux版のライセンス更新（移行）方法に関するガイドです。Ubuntu 22.04を使用し、Spartan' 20 から Spartan' 24 へライセンス更新する方法を例示しています。


最初にインストール済 Spartan' 20 のユーティリティを用いてライセンス管理データを更新した後、続けて、新バージョン Spartan' 24 のインストールを行います。

ライセンス更新用のキーアップデートファイル(.v2cファイル)がお手元にある状況を想定しておりますが、もしこちらのファイルが無ければ、ステップ1の操作で出力される「Key ID」を当方までご連絡ください。対応するキーアップデートファイルを送付させていただきます。

株式会社アフィニティサイエンス テクニカルサポート係


help@affinity-science.com | <https://www.affinity-science.com/>

同一計算機におけるライセンス更新方法(1/3)

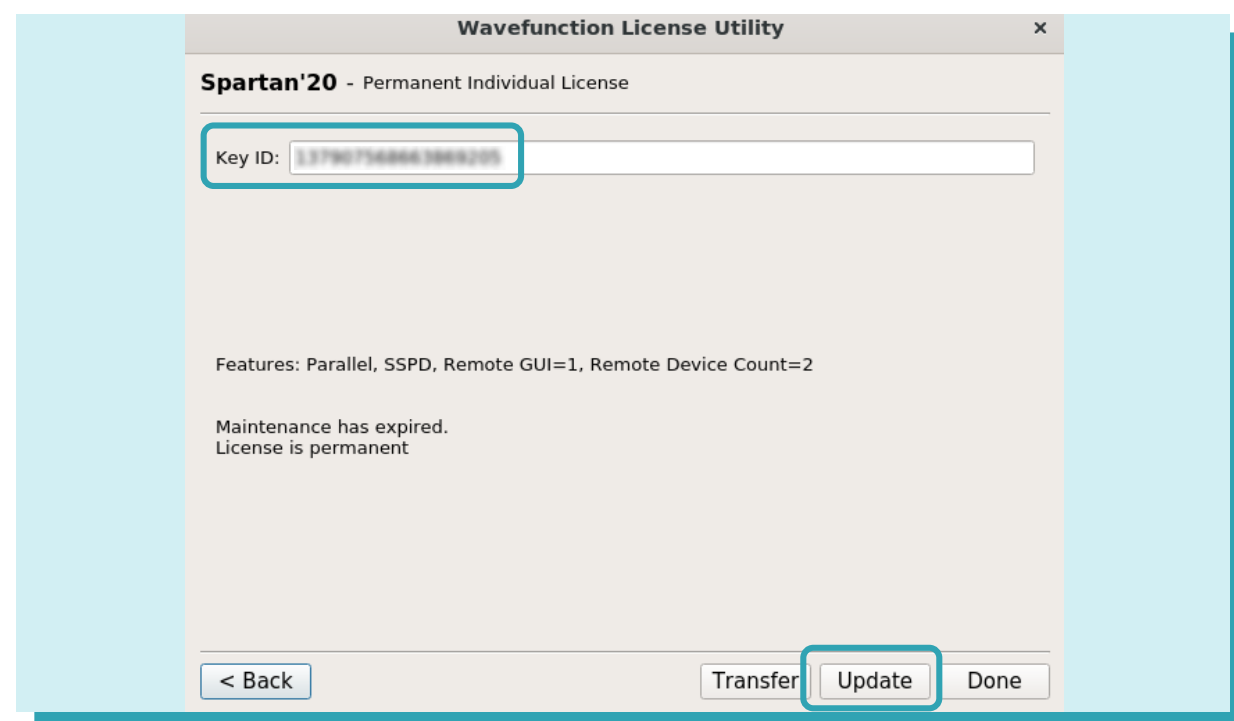

■ ステップ1

- Spartan' 20 を起動し、画面右上の Help > License Utility... を選択、もしくは、Help > About Spartan' 20... を選択後、表示されるダイアログ内の「License Utility」ボタンをクリックし、ライセンスユーティリティを起動します。
- ライセンスユーティリティダイアログが表示され、Key ID等の情報を確認することができます。

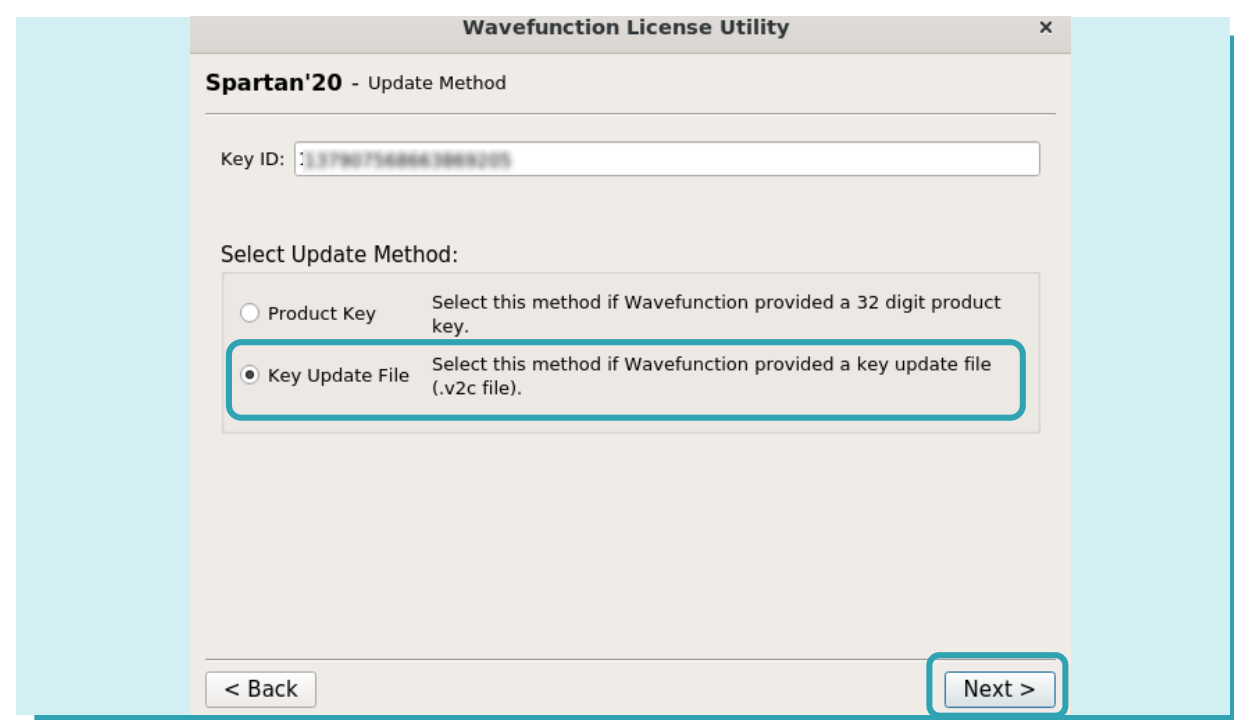


■ ステップ2

- ライセンスユーティリティ画面下部の「Update」ボタンをクリック、「Key Update File」チェックボックスを有効化し、「Next」ボタンをクリックします。

【NOTE】


キーアップデートファイル(.v2cファイル)がお手元がない場合、画面表示されている「Key ID」を弊社までご連絡ください。

同一計算機におけるライセンス更新方法(2/3)

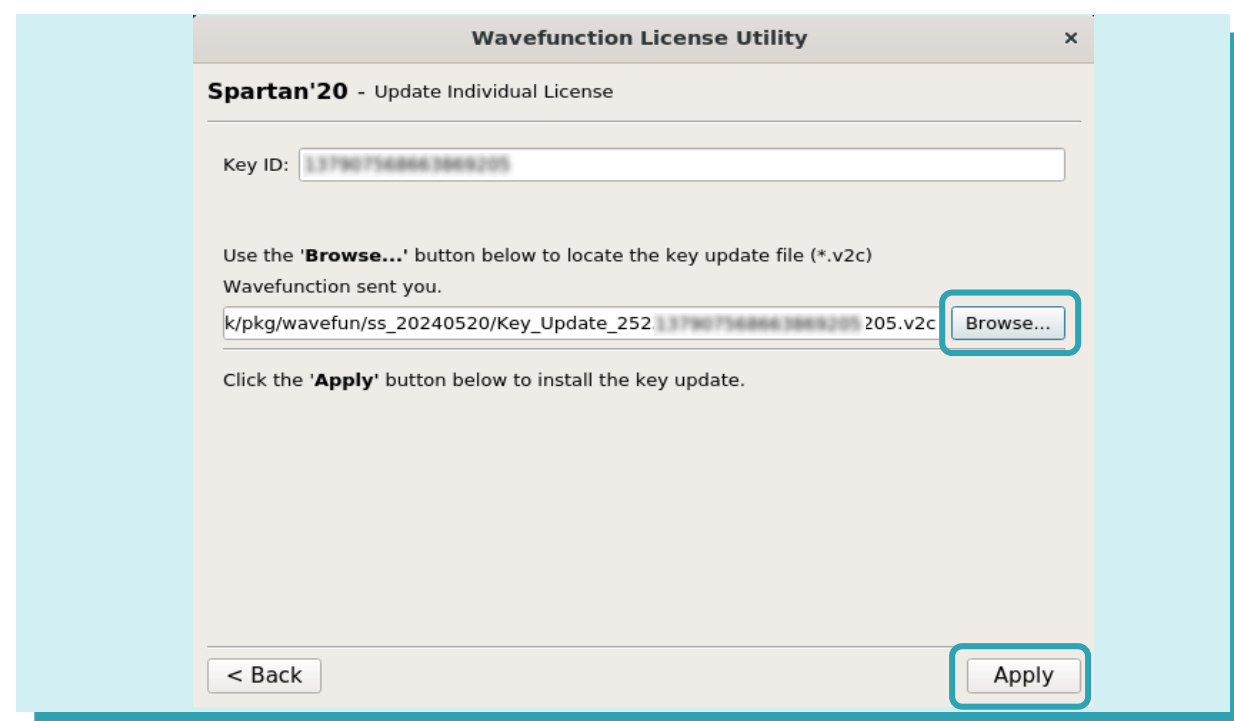

■ ステップ3


- 続いて表示される画面で、「Browse...」ボタンをクリックし、キーアップデートファイル(.v2cファイル)を選択した後、「Apply」ボタンをクリックします。

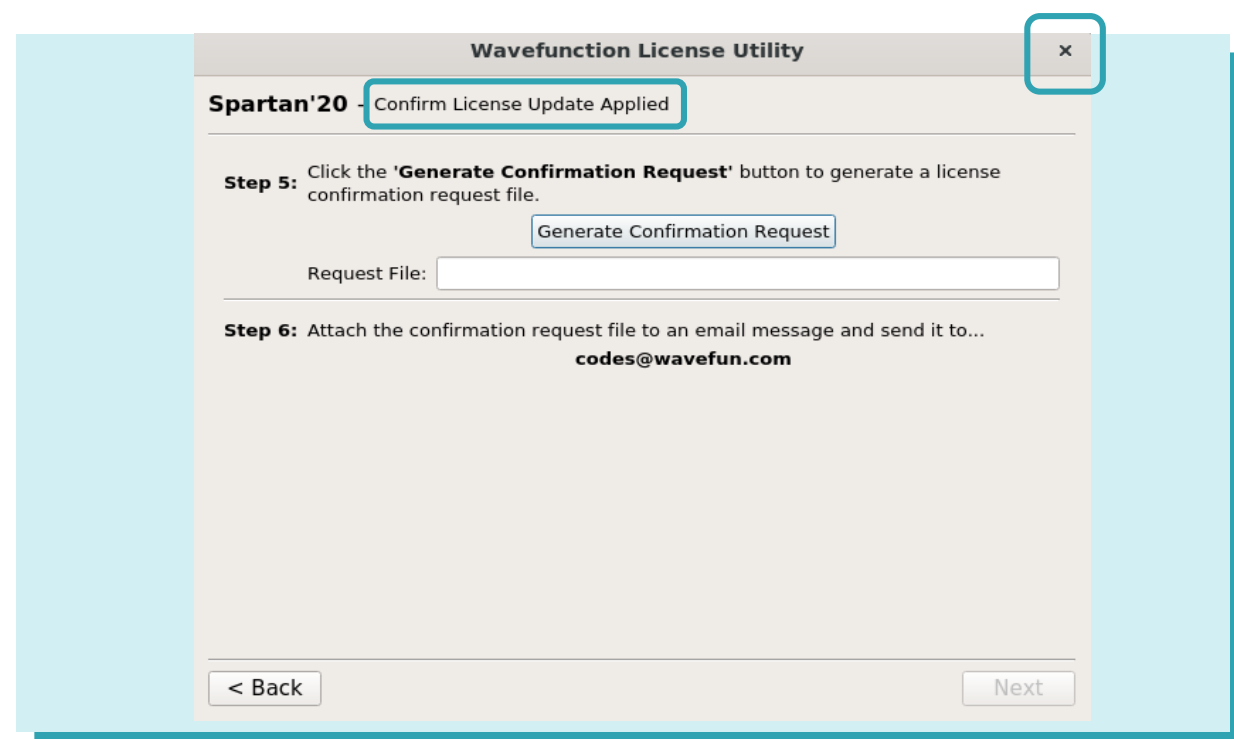

■ ステップ4

- 画面が切り替わり、上部に「Confirm License Update Applied」の文字が出力されればライセンス更新完了です。
- 画面に表示されている「Step 5」以降の操作は、今回必要ありませんので、右上の×ボタンをクリックして、ライセンスユーティリティを終了します。

同一計算機におけるライセンス更新方法(3/3)

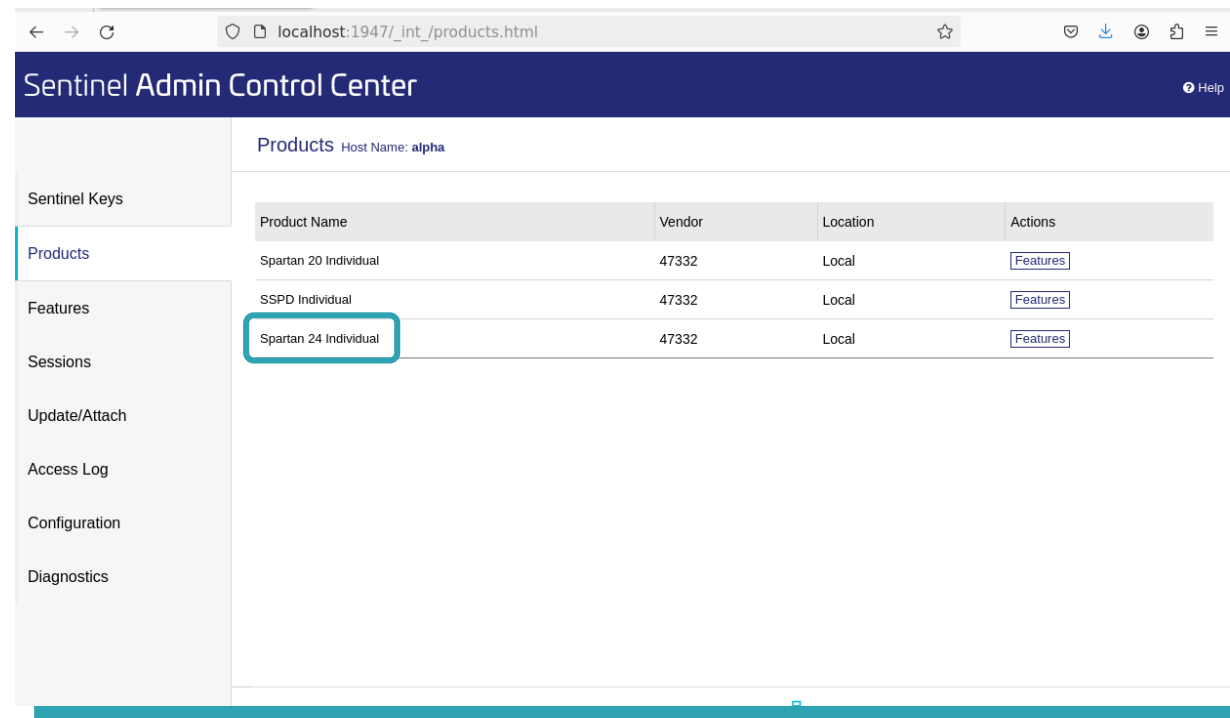

■ ステップ5(任意)

- WEBブラウザで次のURLを開きます。
http://localhost:1947/_int/_products.html
- リスト内に「Spartan 24 Individual」が追加されていれば、正常にライセンスが更新(追加)されています。
- WEBブラウザを終了し、ライセンス更新・確認処理を終了します。

Choose type of license...

- 1) Individual
32 digit product key, installed locally on the machine.
- 2) Network
Server-based, prompt for server name of IP address.
- 3) Code
License with 21 digit Wavefunction activation code.
- 4) Skip
Choose this option to defer license selection.

■ ステップ6

- 続けて、Spartan' 24 のインストールを行います。
- Wavefunction Inc. ウェブサイトより、新バージョンのインストーラを入手し、インストールを開始します。
<https://www.wavefun.com/downloads>
- 表示される画面に従い処理を進めます。ライセンスタイプに「Skip」を指定し、最後まで進めて、インストールを完了します。
- 以上で、Spartan' 24 が利用可能の状態となります。【了】